

Youmidity®

FILTRO RESPIRATORIO HMEF



99,999%

EFICACIA EN FILTRAR
VIRUS Y BACTERIAS

El **FILTRO RESPIRATORIO HMEF YOUMIDITY®** fabricado por ScavMedical es ideal para pacientes sometidos a ventilación mecánica, anestesia, sedación o cuidados intensivos.

Consta de dos membranas, la que está junto al paciente es higroscópica con la función de intercambiar calor y humedad. La otra es la membrana Youshield que, con sus propiedades filtrantes electrostáticas e hidrófobas, crea una barrera eficaz contra virus y bacterias.



Tapa Biconect (doble función):

Puede ser utilizada tanto durante la intubación como en el momento de la eliminación del filtro.

Filtra y humidifica al mismo tiempo


- Cuerpo transparente para una mejor visualización
- Extensión corrugada extensible
- Conexiones cónicas estándar ISO, 22/15 mm
- Conexión de capnografía

ADULTO

- Espacio muerto: 35 ml
- Volumen corriente (VC): 150 - 1000 ml
- Resistencia al flujo: 1,8 cm H₂O a 60 l/min
- Tiempo de utilización recomendado:
24 horas / 48 horas

INFANTIL

- Espacio muerto: 13 ml (en ángulo)
- Volumen corriente (VC): 50 - 250 ml
- Resistencia al flujo: 1,4 cm H₂O a 20 l/min
- Tiempo de utilización recomendado:
24 horas / 48 horas

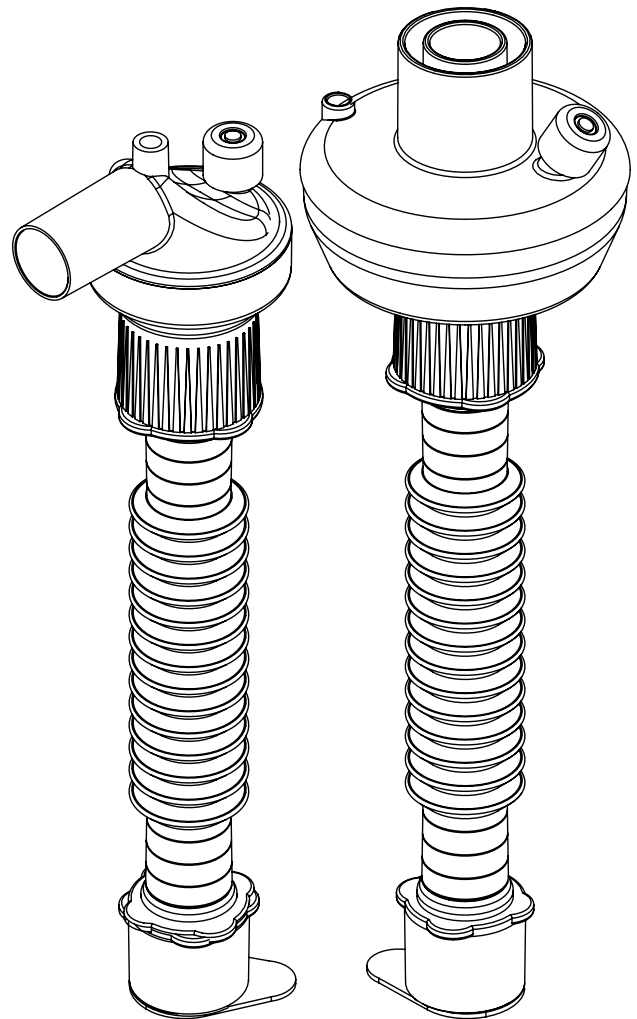

Producto/Descripción	Código	Anvisa
Filtro Respiratorio HMEF YOUMIDITY Adulto con Extensión	YFH-AT	81484760002
Filtro Respiratorio HMEF YOUMIDITY Adulto sin Extensión	YFH-A	81484760003
Filtro Respiratorio HMEF YOUMIDITY Infantil con Extensión	YFH-IT	81484760002
Filtro Respiratorio HMEF YOUMIDITY Infantil sin Extensión	YFH-I	81484760003