

Youmount®

CATÉTER MOUNT

CATÉTER MOUNT CORRUGADO Y EXTENSIBLE

El **CATÉTER MOUNT YOUMOUNT®** es una tráquea corrugada, indicada para transportar gases anestésicos u oxígeno a pacientes sometidos a ventilación mecánica.

El **CATÉTER MOUNT YOUMOUNT®** se conecta entre el paciente (tubo endotraqueal o traqueotomía) y el circuito respiratorio.




Tapa Biconect (doble función):

Puede ser utilizada tanto durante la intubación y en el momento del descarte del filtro.

Catéter Mount

- Extensión corrugada extensible
- Conexiones cónicas estándar ISO, 22/15 mm
- Tapa de extensión con doble función

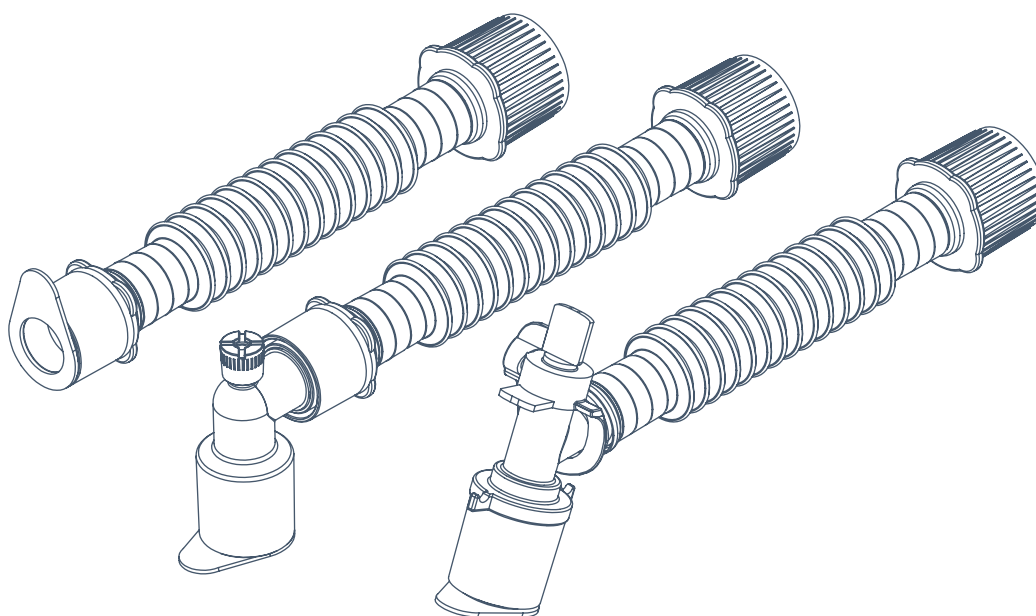

El **CATÉTER MOUNT YOUMOUNT®** debe utilizarse según su presentación:

YMO-R (RECTO): En conexión con el filtro respiratorio en pacientes traqueotomizados o con intubación endotraqueal;

YMO-A (ANGULAR): Para conectar el filtro respiratorio en pacientestraqueostomizados o con intubación endotraqueal. Este modelo dispone de una conexión con tapón estándar ISO Luer-Lock® para capnografía.

YMO-AG (ANGULADO GIRATORIO): Para la conexión del filtro respiratorio en pacientes traqueostomizados o con intubación endotraqueal. Este modelo posee un conector giratorio que se mueve con el circuito y una tapa superior de silicona que permite la inserción de catéteres de aspiración o broncoscopios.

RECTO

- Tamaño: 17 cm
- Conexiones: 15F/22M * 22F

ANGULADO

- Tamaño: 23 cm
- Conexiones: 15M 90° * 22F * capnografía

ANGULADO GIRATORIO

- Tamaño: 13 – 19cm
- Conexiones: 15F/22M 90° * 22F * catéteres de aspiración o broncoscopios

Producto/Descripción	Código	Anvisa
Catéter Mount Recto	YMO-R	81484760013
Catéter Mount Angulado	YMO-A	81484760013
Catéter Mount Angulado Giratorio	YMO-AG	81484760013