


Youfilter®

CATETER MOUNT
COM FILTRO RESPIRATÓRIO HMEF

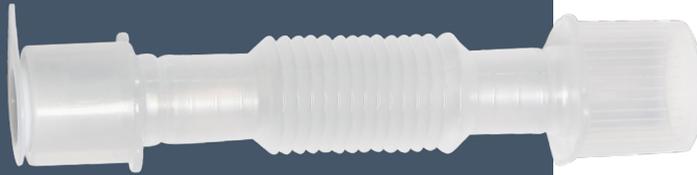

99,999%

DE EFICÁCIA NA
FILTRAÇÃO DE VÍRUS
E BACTÉRIAS

O **YOUFILTER®** foi desenvolvido para o uso em pacientes cujas vias respiratórias superiores são transpostas por uma via respiratória artificial traqueal e que, portanto, perdem a habilidade natural de filtrar e umidificar o ar inspirado, situação que é agravada pelo fato de os gases medicinais usados durante procedimentos de anestesia e ventilação mecânica serem muito frios e secos, se comparados com o ar ambiente.



Tampa Biconect (dupla função):

Pode ser utilizada no momento da intubação e no momento do descarte do filtro.

Filtra e umidifica simultaneamente


- Corpo transparente para melhor visualização
- Traqueia corrugada extensível
- Conexões cônicas padrão ISO, 22/15 mm
- Conexão para capnografia

ADULTO

- Espaço Morto: 35 ml
- Volume Corrente (VC): 150 – 1000 ml
- Resistência ao Fluxo: 1,8 cm H₂O a 60 l/min
- Tempo de Uso Recomendado:
24 horas / 48 horas

INFANTIL

- Espaço Morto: 13 ml (angulado)
- Volume Corrente (VC): 50 – 250 ml
- Resistência ao Fluxo: 1,4 cm H₂O a 20 l/min
- Tempo de Uso Recomendado:
24 horas / 48 horas

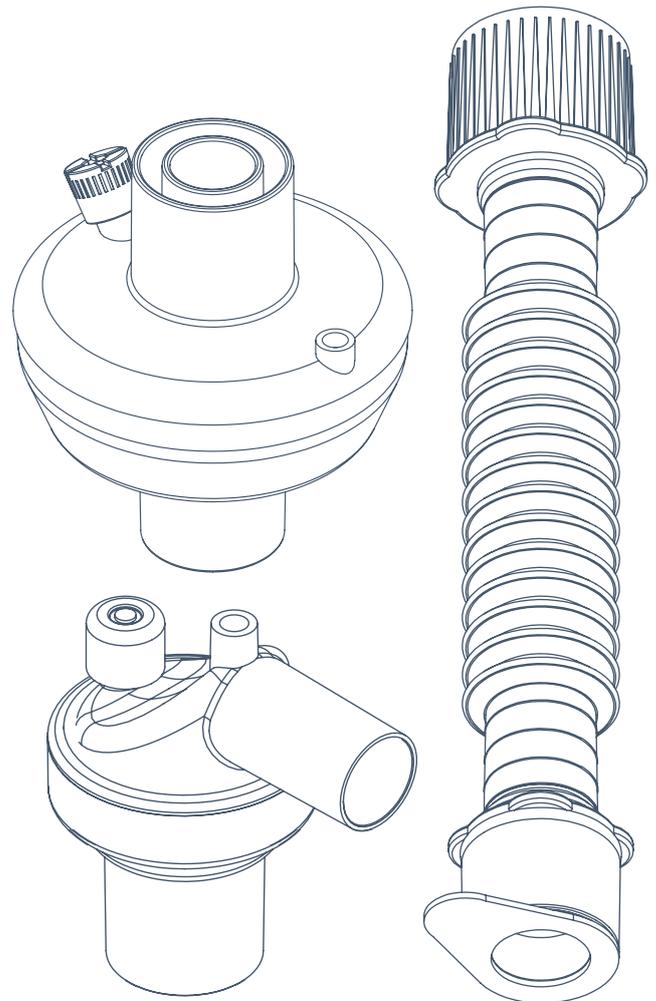

Produto/Descrição	Código	Anvisa
Cateter Mount Reto com Filtro Respiratório HMEF Adulto	YCRF-AT	81484769009
Cateter Mount Reto com Filtro Respiratório HMEF Infantil	YCRF-IT	81484769009
Cateter Mount Angulado com Filtro Respiratório HMEF Adulto	YCAF-AT	81484769009
Cateter Mount Angulado com Filtro Respiratório HMEF Infantil	YCAF-IT	81484769009
Cateter Mount Giratório com Filtro Respiratório HMEF Adulto	YCAGF-AT	81484769009
Cateter Mount Giratório com Filtro Respiratório HMEF Infantil	YCAGF-IT	81484769009