


Youfilter®

CATÉTER MOUNT CON FILTRO
RESPIRATORIO HMEF

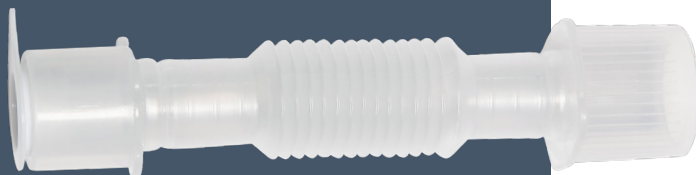

99,999%

EFICACIA EN FILTRAR
VIRUS Y BACTERIAS

YOUFILTER® fue desarrollado para su uso en pacientes cuyas vías respiratorias superiores han sido reemplazadas por una vía respiratoria artificial traqueal, perdiendo así la capacidad natural de filtrar y humidificar el aire inspirado. Esta situación se agrava debido a que los gases medicinales utilizados durante los procedimientos de anestesia y ventilación mecánica son mucho más fríos y secos en comparación con el aire ambiente.



Tapa Biconect (doble función):

Puede ser utilizada tanto durante la intubación como en el momento de la eliminación del filtro.

Filtra y humidifica simultáneamente


- Cuerpo transparente para mejor visualización
- Tubo corrugado extensible
- Conexiones cónicas estándar ISO, 22/15 mm
- Conexión para capnografía

ADULTO

- Espacio muerto: 35 ml
- Volumen corriente (VC): 150 - 1000 ml
- Resistencia al flujo: 1,8 cm H₂O a 60 l/min
- Tiempo de utilización recomendado:
24 horas / 48 horas

INFANTIL

- Espacio muerto: 13 ml (en ángulo)
- Volumen corriente (VC): 50 - 250 ml
- Resistencia al flujo: 1,4 cm H₂O a 20 l/min
- Tiempo de utilización recomendado:
24 horas / 48 horas

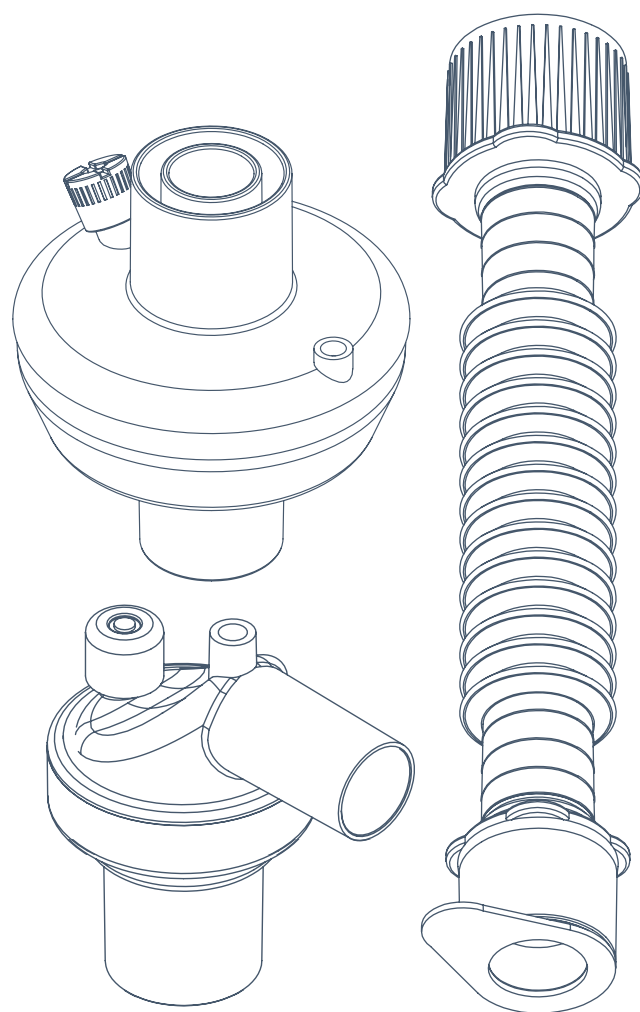

Producto/Descripción	Código	Anvisa
Catéter Mount Recto con Filtro Respiratorio HMEF Adulto	YCRF-AT	81484769009
Catéter Mount Recto con Filtro Respiratorio HMEF Infantil	YCRF-IT	81484769009
Catéter Mount Angular con Filtro Respiratorio HMEF Adulto	YCAF-AT	81484769009
Catéter Mount Angular con Filtro Respiratorio HMEF Infantil	YCAF-IT	81484769009
Catéter Mount Giratorio con Filtro Respiratorio HMEF Adulto	YCAGF-AT	81484769009
Catéter Mount Giratorio con Filtro Respiratorio HMEF Infantil	YCAGF-IT	81484769009